

INSTALAÇÃO DA DIVISÓRIA

HOSPITAL SCREEN ASSEMBLY / INSTALACIÓN DEL BIOMBO



5 Parafuse a tampa de acabamento no montante da parede.

Fasten the finishing cover on the jamb fixed on the wall.
Atornillar la tapa de acabamiento en la jamba de la pared.



6 Encaixe o segundo gancho marcado com um adesivo azul na última lâmina da divisória também marcada com adesivo azul. Observe o posicionamento correto dos adesivos de acordo com a largura da divisória.

Place the second hook marked with a blue adhesive on the last panel of the hospital screen also marked with the blue adhesive. Observe the correct positioning of the adhesives according to the width of the hospital screen.

Encaje el Segundo gancho marcado con la pegatina azul en el último panel del biombo también marcado con pegatina azul. Observe la posición correcta de las pegatinas de acuerdo con el ancho del biombo.



7 Para encaixar o conjunto de lâminas e gancho no montante móvel junto a ponta superior do gancho na parte superior do montante de forma que os adesivos azuis estejam alinhados e pressione firme e gradativamente de cima para baixo até o encaixe total.

To place the set of panels and hook on the jamb of the mobile base, get together the upper end of the hook on the upper part of the jamb in a way that the blue adhesives be aligned and firmly press and gradually from up to bottom until it totally fits.

Para encajar el conjunto de paneles y gancho en la jamba de la base móvil, junte la punta superior del gancho en la parte superior de la jamba de manera que las pegatinas azules estén alineadas, presione firme y gradualmente de arriba para abajo hasta el encaje total.



8 Finalize a montagem encaixando a tampa de acabamento na haste móvel, parafuse a tampa e insira o pino de acabamento sobre o parafuso, conforme mostra a figura acima.

End the assembly placing the finishing cover on the mobile base, fasten the cover and insert the finishing pin over the screw, as shown in the above figure.

Termine el montaje encajando la tapa de acabamiento en la base móvil, atornille la tapa e inserte el pino de acabamiento sobre el tornillo, de acuerdo con el dibujo arriba.

9 Para a instalação da divisória móvel de 2 bases, siga o procedimento das figuras 6, 7 e 8; atentando-se ao alinhamento dos adesivos correspondentes.

For the installation of the mobile hospital screen of two bases, follow the steps of figures 6, 7 and 8; pay attention to the alignment to the corresponding adhesive.

Para el montaje del biombo móvil con dos bases, siga las instrucciones de los dibujos 6, 7 y 8. Atención para el alineamiento de las pegatinas correspondientes.




1 O montante é bivalente, ou seja, os dois lados são iguais. Determine o local e fixe na parede.

ATENÇÃO: o montante da parede é maior do que o da haste.

The jamb profile is bivalent, meaning that both sides are equal. Define the location and fasten the jamb profile on the wall. ATTENTION: The jamb of the wall is bigger than the one from the base.

La jamba es bivalente, o sea, los dos lados son iguales. Determine el sitio y fije en la pared. ATENCIÓN: La jamba de la pared es más grande que la jamba de la base móvil.

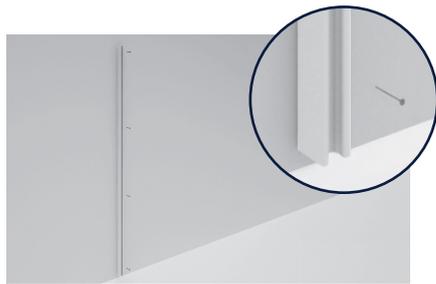

2 Faça 4 furos no montante, encoste no piso e fixe na parede com parafusos 4,2 x 3,8mm e buchas 6mm. Se necessário recorte o montante para encaixar no rodapé.

Make four holes in the jamb profile, lean it on the floor and fasten it on the wall with 4,2 x 3,8mm screws and 6mm plugs. If necessary, cut the jamb profile to fit on the baseboard.

Haga cuatro huecos en la jamba, apoye en el piso y fije en la pared con tornillos 4,2 x 3,8mm y taquetes de 6mm. Si necesario corte la jamba para encajar en el zócalo.



3 Insira o gancho na lâmina de forma que os adesivos vermelhos estejam do mesmo lado, observando a posição acima e empurre até o final.

Insert the hook on the panel assuring that the red adhesives are on the same side and observing the image above, push it until the end.

Insertar el gancho en el panel asegurando que las pegatinas rojas estén del mismo lado, mirando la imagen arriba y presione hasta el final.



4 Para encaixar o conjunto de lâminas e gancho no montante da parede, junte a ponta superior do gancho com a do montante e pressione firme e gradativamente de cima para baixo até o encaixe total.

To place the set of panels and hook on the jamb fixed on the wall, get together the upper tip of the hook with the tip of the jamb, press firmly and gradually from top to bottom until it totally fits.

Para encajar el conjunto de paneles y gancho en la jamba fija en la pared, junte la punta superior del gancho con la punta de la jamba y presione firme y gradualmente de arriba para abajo hasta el encaje total.

Atenção para o alinhamento dos adesivos correspondentes:
Adesivo vermelho ● com adesivo vermelho ●
Adesivo azul ● com adesivo azul ●

Pay attention to the alignment of the corresponding adhesives:
Red adhesive ● with red adhesive ●
Blue Adhesive ● with blue adhesive ●

Atención para el alineamiento de las pegatinas correspondientes:
Pegatina roja ● con pegatina roja ●
Pegatina azul ● con pegatina azul ●

Imagens meramente ilustrativas, mudanças sem prévio aviso
Images merely illustrative, changes without previous warning
Imágenes meramente ilustrativas, cambios sin previo aviso

CONHEÇA NOSSOS OUTROS PRODUTOS LINHA PROFISSIONAL

CHECK OUR OTHER PRODUCTS PROFESSIONAL LINE
CONOSCA NUESTROS OTROS PRODUCTOS LINEA PROFISIONAL

**plast
porta**

SANFONADA



BOX
SANFONADO



Conheça a linha completa de produtos BCF
acessando nosso site: www.bcf.com.br

Check our complete line of BCF products on our website:
www.bcf.com.br

Conozca la completa linea de productos BCF en nuestro sitio web:
www.bcf.com.br



PARA MAIORES
DETALHES SOBRE
A INSTALAÇÃO
ASSISTA AOS
NOSSOS VÍDEOS

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE ASSEMBLY,
WATCH OUR VIDEOS

PARA MAS INFORMACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN
MIRA NUESTROS VIDEOS



BCF

Qualidade incomparável

Rua Almirante Brasil 211 03164 120 São Paulo SP Brasil
Tel + 55 11 2291 2444 sac@bcf.com.br www.bcf.com.br
SAC 0800 774 2424, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00

DIVISÓRIA

móvel

MANUAL DE INSTALAÇÃO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTALACIÓN



BCF

Qualidade incomparável